

# PEÇA DE MÃO PARA CORTE ÓSSEO

FREQUÊNCIA DE 35 KHZ



**Söring**  
INNOVATIVE SURGERY  
TECNOLOGIA ULTRASSÔNICA

Os instrumentos ultrassônicos para ossos foram desenvolvidos em conjunto com os melhores cirurgiões de coluna para oferecer pontas de sonotrodo de alto desempenho com a tecnologia ultrassônica.


Com uma diversidade de tipos de pontas, o cirurgião tem a liberdade para escolher a peça que irá ser mais eficiente para o procedimento. Todos os instrumentos estão qualificados com extrema precisão, garantindo que as estruturas mais frágeis na região da coluna, adjacente ao local de trabalho, sejam estritamente preservadas.

Além do seu uso em procedimentos cirúrgicos na coluna cervical, as peças de mão para ossos também podem ser usadas na região do crânio e na ortopedia.

- DISSECÇÃO CONTROLADA CORTE E RASPAGEM SELETIVA DE OSSOS E ESTRUTURAS RÍGIDAS
- PRESERVAÇÃO DE TECIDOS MOLES, VASOS E NERVOS ADJACENTES
- REDUZ SIGNIFICAMENTE O PERIGO DE LESÃO DA DURA-MÁTER

## Modelos faca e raspador, curto e longo.

Os sonotrodos descartáveis são intuitivamente fáceis e rápidos de serem substituídos durante procedimentos cirúrgicos, se necessário.

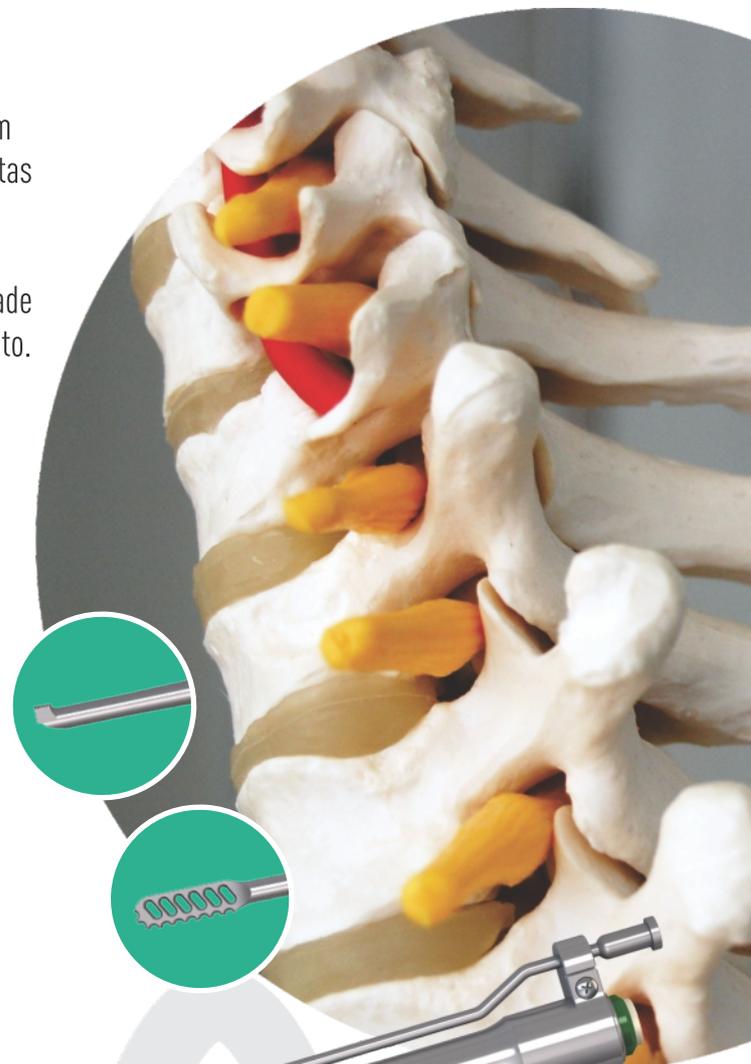

AS PEÇAS TRABALHAM COM IRRIGAÇÃO, QUE É ESSENCIAL PARA O PROCESSO DE CAVITAÇÃO.

  
**PANMEDICA**  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A VIDA



## QUALIDADE

Os SONOTRODOS podem ser facilmente montados e substituídos em qualquer momento.

### Especificações técnicas



Peça de Osso  
Faca  
Sonotrodo Curto

Peça de Osso  
Faca  
Sonotrodo Longo



Peça de Osso  
Raspador  
Sonotrodo Curto

Peça de Osso  
Raspador  
Sonotrodo Longo

	Peça de Osso Faca Sonotrodo Curto	Peça de Osso Faca Sonotrodo Longo	Peça de Osso Raspador Sonotrodo Curto	Peça de Osso Raspador Sonotrodo Longo
Peça de Mão de Sonotrodo	92-050	92-050	92-050	92-050
Comprimento de Trabalho	36mm	101mm	38mm	100mm
Comprimento Total (externo)	216mm	280,5mm	218,5mm	279,5mm
Peso	75g	77g	77g	78g
Ponta Sonotrodo (externo)	8,5x0,9x3,0mm	8,5x0,9x3,0mm	1,45x2,0x3,2mm	1,45x2,0x3,2mm
Ponta Sonotrodo (interno)	-	-	-	-
Irrigação	Externa	Externa	Externa/Interna	Externa/Interna
Aspiração	Não	Não	Não	Não
Material Peça de Mão e Sonotrodo	Titânio	Titânio	Titânio	Titânio

## A BASE

### O gerador ultrassônico SONOCA 300 ou 185

- Oferece irrigação integrada e função de aspiração
- Proporciona configuração rápida com autoteste automático
- Permite fácil adaptação dos parâmetros operacionais graças à interface intuitiva
- Suporta todos os instrumentos ultrassônicos Soring



Procure e siga @panmedica nas redes



WWW.PANMEDICA.COM.BR

CLIQUE PARA ACESSAR!



**PANMEDICA**  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A VIDA

RUA AUGUSTA, 1378 - S/L - SÃO PAULO - SP - BRASIL  
55 (11) 3289-4600 | (11) 98105-7550 | (11) 98105-4840  
PAN@PANMEDICA.COM.BR